



Zibo ShowerBuddy Tilt Brugervejledning

FORSIGTIG BRUG:

Zibo Shower Tilt Toilet/badestol er et medicinsk udstyr, der er beregnet til brug af personer med begrænset mobilitet, som ikke er i stand til at stå, gå og / eller sidde uafhængigt. Enheden er specielt designet til personer, der har behov for ekstra støtte og stabilitet under vask, toilet og andre hygiejniske aktiviteter. Det er et medicinsk udstyr i klasse 1, der kun er beregnet til at blive brugt som siddeplads til toiletartikler, brusebad og badning. Dets formål er at hjælpe fysisk handicappede under deres hygiejniske aktiviteter. Al anden brug er forbudt.

INDIKATIONER:

Enheden er specifikt indiceret til personer, der (på grund af den store række mulige sundhedsmæssige problemer) ikke er i stand til at stå og / eller gå, og derfor har de brug for et hjælpeapparat til at vedligeholde nogle eller alle daglige hygiejniske opgaver.

KONTRADIKTIONER:

Denne type enhed må ikke bruges af en handicappet person alene. Brugeren skal altid ledsages af en plejeperson eller hjælpeperson. Enheden anbefales ikke til personer med slapp lammelse eller andre sygdomme, der forårsager alvorlige kropskontrolproblemer. Sådanne personer kræver specielle kørestole designet til ekstra stabilitet og støtte af brugerens krop. Behovet for denne type specialkørestol skal altid vurderes og angives af en læge eller fysioterapeut.

ADVARSEL - Inkluderet i denne emballage og monteret på brusebadstolen er små dele, plastfolie og polystyrenemballage, der kan være farlige for børn under 5 år.

Hold børn væk fra denne enhed, og lad dem ikke lege med nogen dele. Det skal holdes væk fra børn under 5 år.




Vær forsigtig. Fingre og andre kropsdele kan blive klemt under brug eller betjening af ZiboShower under følgende: sammenklapning, eller tilpasning af enheden. Vær særlig forsigtig når du justerer på enheden. Så du ikke klemmer fingrene eller andre kropsdele under brug.

Indhold

Grafisk lise over dele	3
Liste over dele	4
Zibo Shower Tilt Samling	5
Zibo Shower Tilt Brug	12
Stiverjustering	17
Rengøring + vedligeholdelse	20
Sikkerhedsoplysninger	21
Oplysninger om garanti	24
Tilmeldingsblanket	26

Grafisk lise over dele

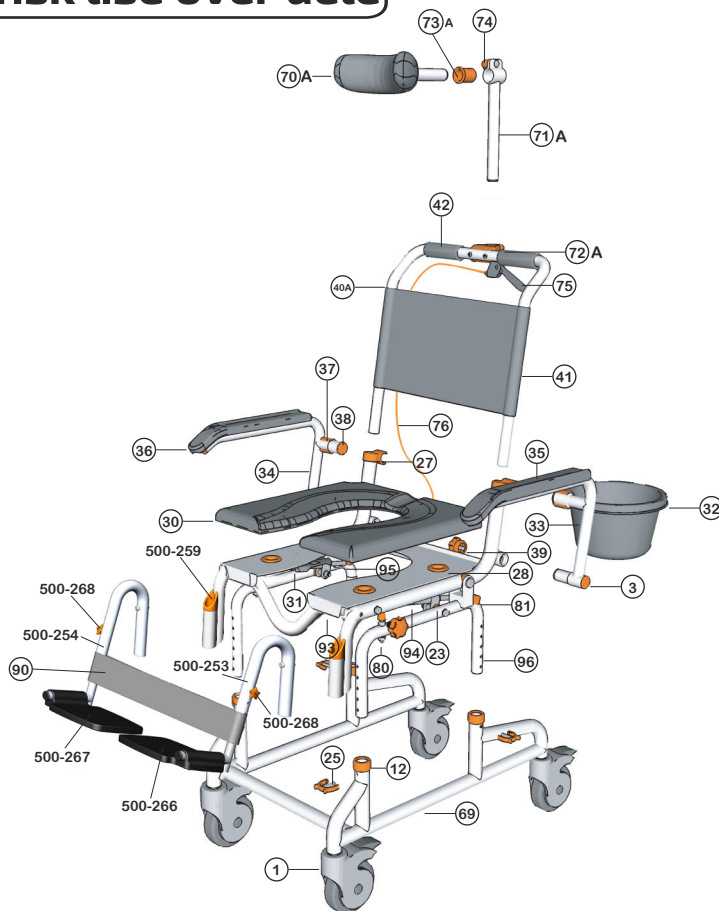


Liste over dele

Se den grafiske liste for billeder af de forskellige dele på toiletstolen

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ① 5 "hjul | ⑦①A Justeringsrør for nakkehøjde |
| ③ Rørhætte (25mm) | ⑦②A Nakkestøttebeslag |
| ⑫ Ben rør hætte | ⑦③A Nakkestøtte ærme |
| ⑫ Rørske (25 mm) | ⑦④ Nakkestøtte håndtag |
| ⑫ Sikringsklemme (stor) | ⑦⑤ Håndtag til tilt |
| ⑫ Armstøtteklemme | ⑦⑥ Stiverkabel |
| ⑫ Pude samler stik | ⑧⑥ Gummistop |
| ⑫ Pude | ⑧⑦ Tiltstop |
| ⑫ Betræk samler | 500-268 Fodstøttejusteringsknap |
| ⑫ Bækkent + låg | 500-268 Fodstøttejusteringsknap |
| ⑫ Armlen (venstre) | 500-253 LH Benforsamling |
| ⑫ Armlen (højre) | 500-254 RH Benforsamling |
| ⑫ Polstring af armstøtte (venstre) | 500-266 LH fodstøtte |
| ⑫ Polstring af armstøtte (højre) | 500-267 RH fodstøtte |
| ⑫ Armlen lås | 500-259 Benrør |
| ⑫ Armlenhætte | ⑨⑥ Lægstrop |
| ⑫ Armlæneknep | ⑨③ Sædebase |
| ⑫ Ryglænsramme | ⑨④ Stag (venstre) |
| ⑫ Ryglænestof | ⑨⑤ Stag (højre) |
| ⑫ Håndgreb | ⑨⑥ Højdejusteringsrør |
| ⑫ Rullende bundben | |
| ⑦①A Nakkestøtte | |

montering

Trin 1

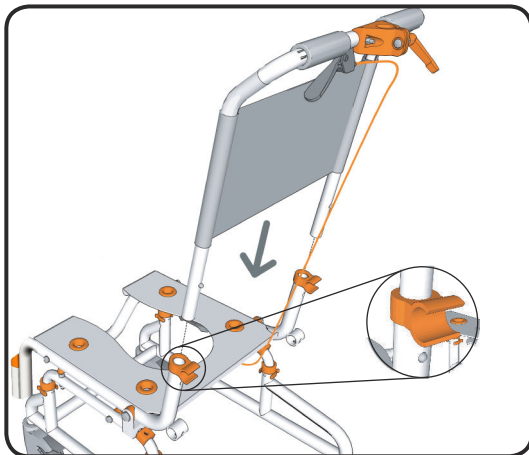


Indsæt ryglænsrammen i sædet. Skub ryglænsrammen ind i sædebunden, indtil klemmestifterne klikker ind i hullerne på sædet.

Klipstifterne fastgør ryglænets stol på plads.

BEMÆRK

- Tryk klemmestifterne ind for at fjerne ryggen, og skub ryglænet ud fra sædet.

Trin 2

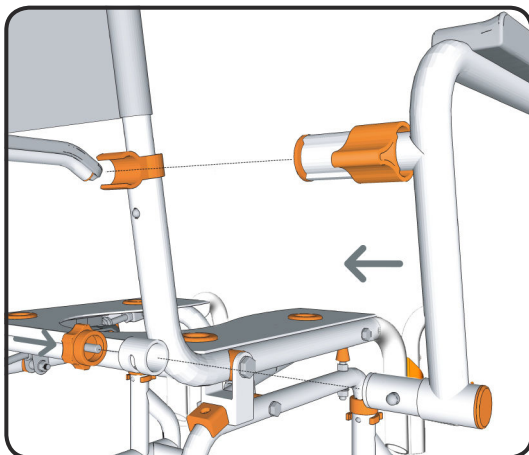


Indsæt armstøtterne i soklerne på sædebunden, indtil klipstiften klikker og placerer armstøtterne på plads.

Skru armlænskappen ind i armlenet for at sikre armstøtten ordentligt på plads.

Sving armlenet fremad, så det låses på plads i armstøtteklemmen.

Skub armstøttelåsen over armlænsklemmen for at låse armstøtten på plads.

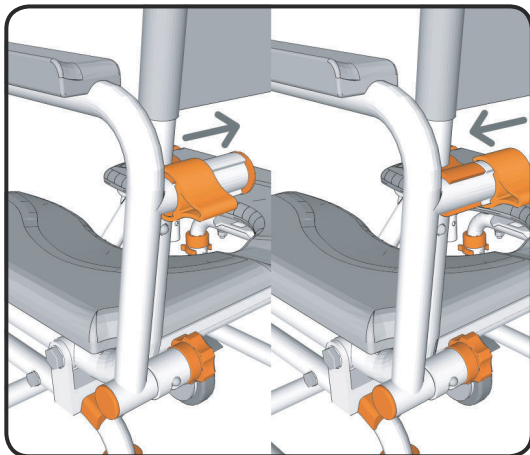

Trin 3

Ved at skubbe armlænslåsen kan du nemt svinge armlænet ud af vejen eller sikre armlænet i position.

For at låse op armlænet skal du skubbe armlænslåsen væk fra armlænet.

For at låse armlænet skal du skubbe armlåslåsen mod armlænet.

BEMÆRK

- Armlænslåsene skal altid bruges, når armlænene ikke er i svingbar position.


Trin 4

Armlænene kan let svinges væk, når det er nødvendigt.


Lås armlænet op ved at skubbe armlåslåsen væk fra armlænet. Når dette er gjort, kan armlænet svinges væk. Klemmepinden, der fastgør armlænet i position, forhindrer armlænet i at dreje til langt.

BEMÆRK

- Armlænslåsen skal altid bruges, når armlænene ikke er i sving væk position.

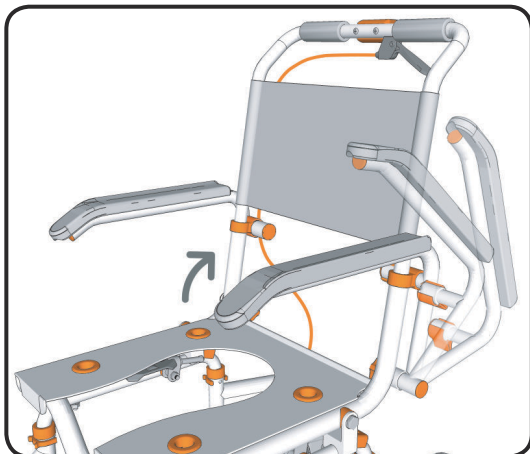

Vær forsigtig. Fingre og andre kropsdele kan blive klemt under brug eller betjening af ZiboShower under følgende: sammenklapning, eller tilpasning af enheden. Vær særlig forsigtig når du justerer på enheden. Så du ikke klemmer fingrene eller andre kropsdele under brug.

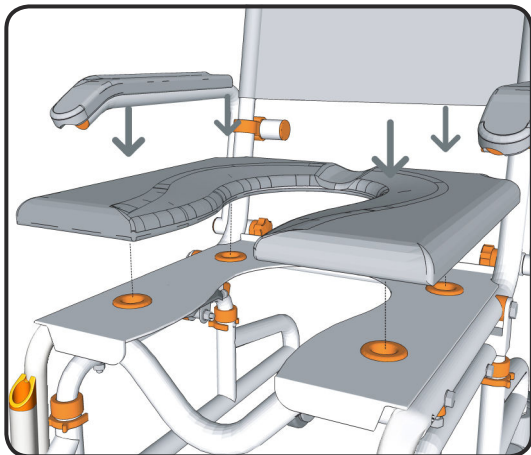

Trin 5


Sørg for den korrekte orientering, fastgør sædehynden til sædebasen ved at skubbe de 4 placeringshylster på undersiden af hynden ind i stikkene på sædet.

Tryk puden fast på plads

så de 4 placeringsklemmer er sikkert placeret i stikkene.

BEMÆRK


- For at fjerne puden, skal du forsigtigt fjerne en klap ad gangen fra stikkene, indtil alle 4 placeringsklemmer er fjernet.

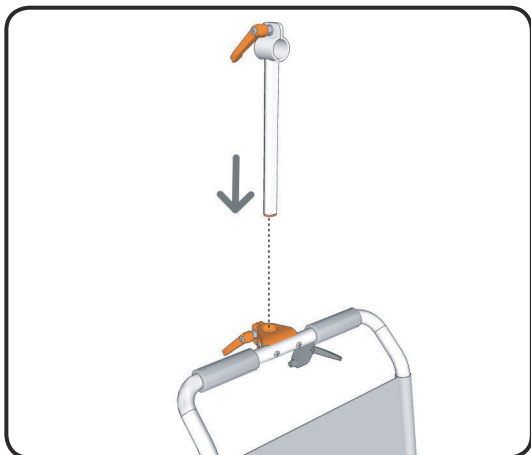

Trin 6

Skub nakkestøttens højdejusteringsrør ind i nakkestøttebeslaget. Juster til den ønskede højde og fastgør i den rigtige position.

Ved at skrue nakkestøttehåndtaget med uret vil spændingen til nakkestøtten stramme og fastgøre justeringsrøret på nakkestøttens højde på plads.

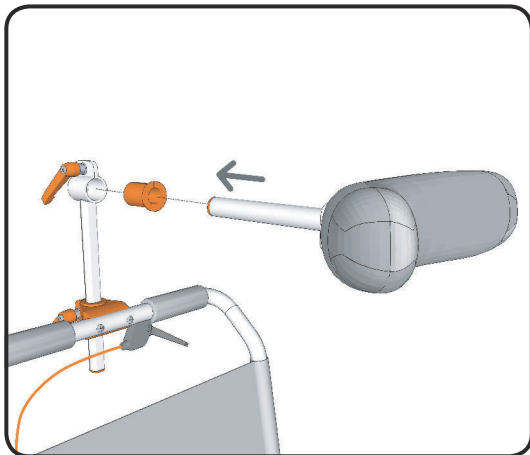

Trin 7

Før at fastgøre nakkestøtten skal du indsætte plastikhylsteret i nakkehøjdenjusteringsrør.


Indsæt nakkestøtten i ærmet på justeringsrøret på nakkestøttens højde. Justere

til den krævede længde og fastgør i den rigtige position. Ved at skruer nakken

hvhåndtaget med uret, vil nakkestøtten til justering af rørhøjden stramme og fastgøre nakkestøtte i position.

BEMÆRK


- Halsstøtten skal altid bruges og justeres, så den passer til den specifikke bruger.

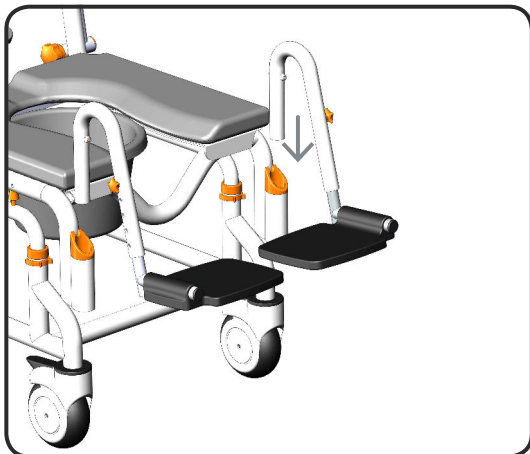

Trin 8

Indsæt fodstøtterne som vist ved blot at droppe hvert ben ned i rørholderen.

Sørg for, at hvert ben er helt placeret i spalten bagpå for at forhindre, at benet rider. For at rotere benet skal du bare løfte og rotere ud af vejen.

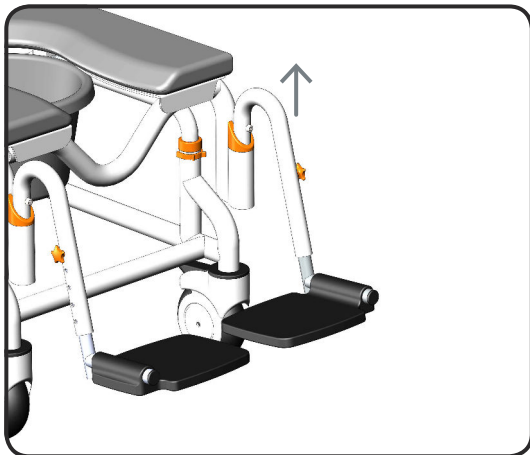


Trin 9

For at svinge fodstøtten ud af vejen, løft blot benet ud af spalten og drej benet væk.

ADVARSEL


STÅ IKKE PÅ FODRESTE Stolen vil være ustabil og vælte fremad, hvis kropsvægt påføres fodstøtter

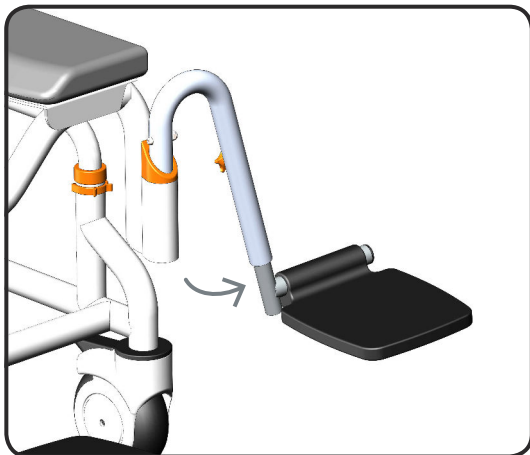

Trin 10

Når du har låst fodstøtterne op, skal du dreje fodstøtterne udad for at give let adgang til stolen.

Drej om nødvendigt fodstøtterne indad for at placere fodstøtterne igen.

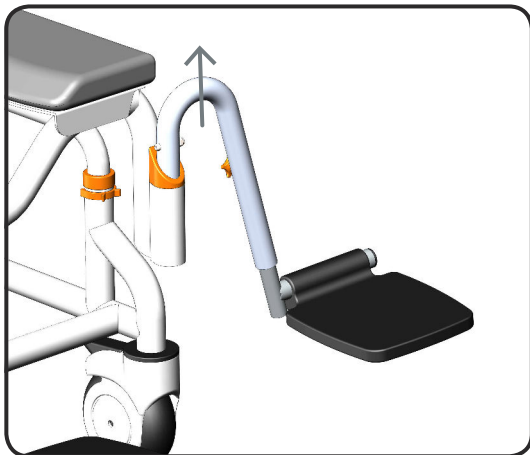


Trin 11

Med fodstøtten i svingbar position kan fodstøtten let fjernes.

Løft fodstøtten opad for at skubbe fodstøtten ud af fodstøttestik.

BEMÆRK

- Fodstøtterne skal altid bruges til sikkerhed, især når stolen er tilbagelænet.

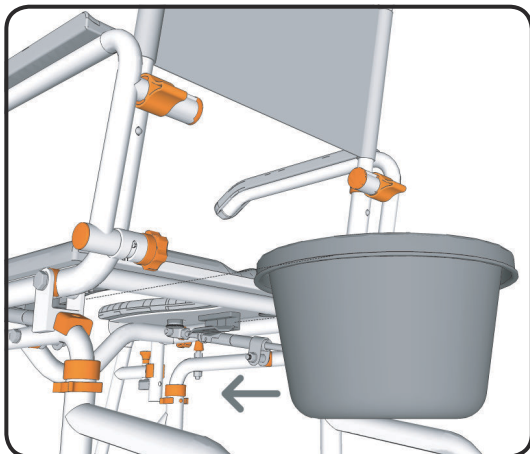


Trin 12

Drej stolen, så du har let adgang til undersiden af sædebasen.
Fra bagsiden af objektglasset kører kommodespanden ind i de 2 konsoller på undersiden af sædebasen.

Sørg for at kommodespanden skubbes langt nok ind, at konsollerne sikkert holder kommodespanden på plads.

Kommodespanden skal være centreret under åbningen i puden.

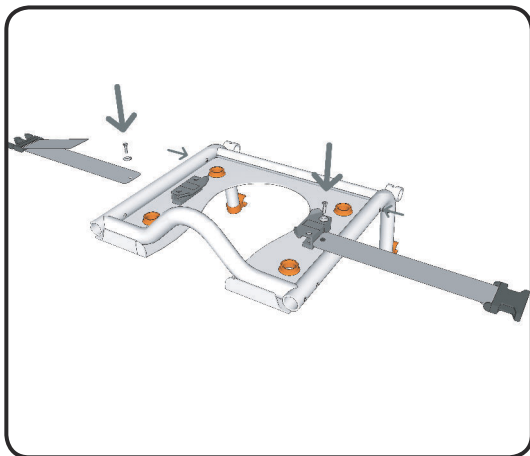


Trin 13

På undersiden af sædet er der 4 fastgørelsespunkter til skaftbæltet.

Skru de medfølgende skruer og skiver ud af de forreste fastgørelsespunkter på undersiden af sædet.

Vælg de fastgørelsespunkter, du foretrækker til dit skødbælte.

Skub skiven på skruen, og sæt den derefter igennem ringen i skødebåndet. Skru skaftbæltet sikkert ind position.

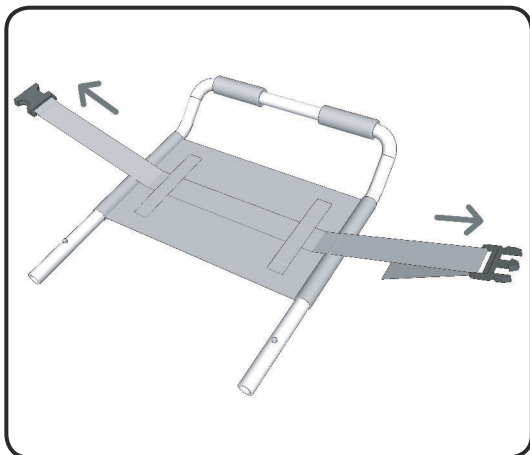


Trin 14

For at fastgøre brystbæltet skal du dreje stolen, så du har let adgang til ryggen på ryggen.

Skub brystbæltet gennem de 2 fastgørelsessøjler på ryglænet.

Før brug skal du justere længden af brystbæltet, så den passer til brugeren.

Betjening

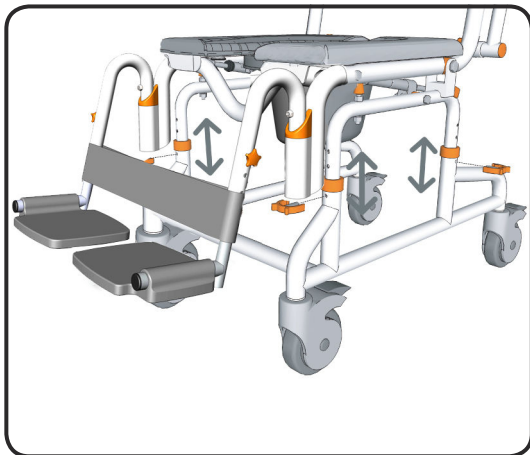

For at justere sædehøjden skal du fjerne fastgørelsesklemmerne og skub højdejusteringsrørene op eller ned til den ønskede højde.

Fastgør begge højdejusteringsrør i den krævede højde ved hjælp af 1 stor fastgørelsesklemme på hvert bundben.

BEMÆRK


- Hvert højdejusteringshul løfter sædeunderlaget 1 ".

- Kontroller, at alle fastgørelsesklip er indsat helt.


- Sørg for, at begge højdejusteringsrør er rettet i samme højde.



Zibo Shower Tilt

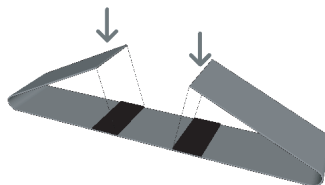

Side 12

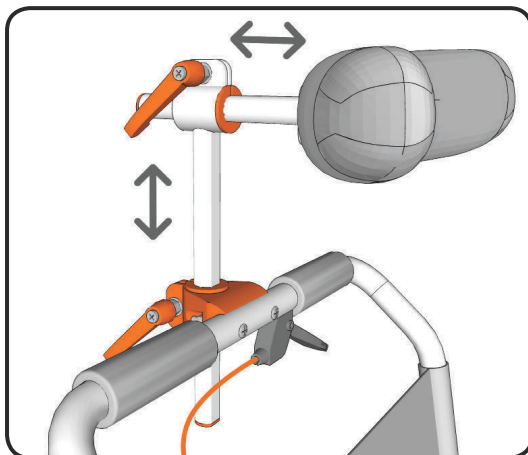


Trin 1

Før du bruger stolen, skal du justere nakkestøtten, så den giver den rette støtte til den påtænkte bruger. Skru nakkestøttehåndtagene løs, så rørene let kan glide for justering.

Fastgør nakkestøtten i den rigtige position ved at stramme nakkestøttehåndtagene sikkert.

BEMÆRK

- Sørg for, at begge håndtag er strammet korrekt inden brug for at forhindre, at nakkestøtten bevæger sig.

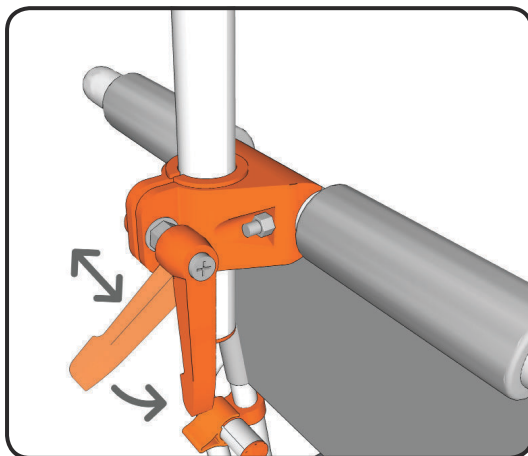

Trin 2


Efter justering af nakkestøtten kan du justere placeringen af nakkestøttehåndtaget for at forhindre, at det stikker ud.

For at gøre dette skal du trække i håndtaget til højre og derefter dreje.

Dette gør det muligt at dreje håndtaget frit uden at stramme eller løsne nakkestøtten.

Håndtaget springer derefter tilbage på plads, når det frigøres.

Denne metode kan også bruges, når nakkestøtten strammes.

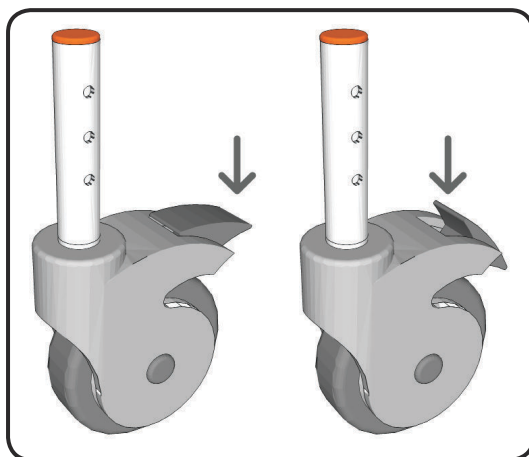


Trin 3

Tryk fast på enden af bremsen med din fod for at låse hjulene. Dette låser hjulet, så det ikke bevæger sig eller roterer.

For at låse hjulene tryk fast ned foran på bremsen med din fod. Dette gør det muligt for hjulet at bevæge sig frit igen.

BEMÆRK

- Hjulene skal altid være låst, når der udføres overførsler. Hjul kan drejes fremad for at gøre stolen mere stabil.

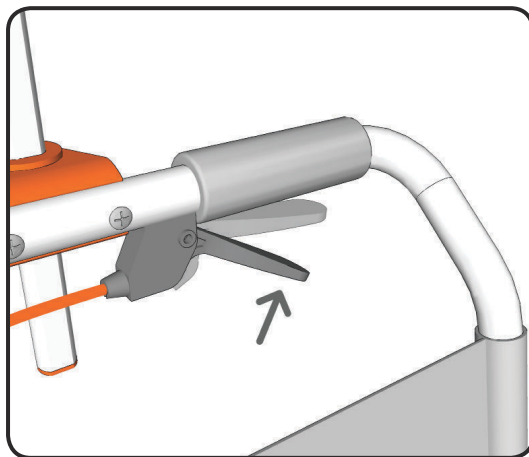

Trin 4


For at lægge stolen tilbage skal du skubbe vippehåndtaget på ryglænet.

Når du klemmer på grebet, låses begge låsestivere op, og stolen kan lægges tilbage.

Når håndtaget frigøres, sikrer låsestiverne stolen i denne position.



Vær forsigtig. Fingre og andre kropsdele kan blive klemte under brug eller betjening af ZiboShowe under følgende: sammenklapning, eller tilpasning af enheden. Vær særlig forsigtig når du justerer på enheden. Så du ikke klemmer fingrene eller andre kropsdele under brug.

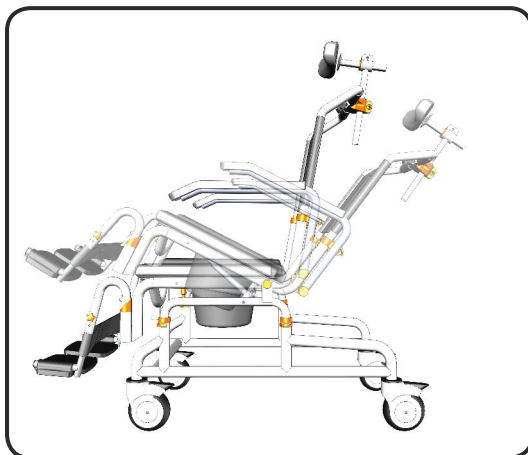


Trin 5

Mens klemme på bremsehåndtaget kan stolen lægges tilbage 30 ° fra lodret stilling. Når du ligger på stolen, kan du frigøre vippehåndtaget, og låsestiverne sikrer stolen i denne position. Når stolen er tilbagelænet, skal du understøtte en lille mængde af brugerens vægt.

BEMÆRK


- Før stolen lægges tilbage, er det vigtigt at være fortrolig med bevægelsen og hvordan stolen fungerer.
- Stolen har sikkerhedsstop, der forhindrer, at stolen ligger tilbage end 30 °.

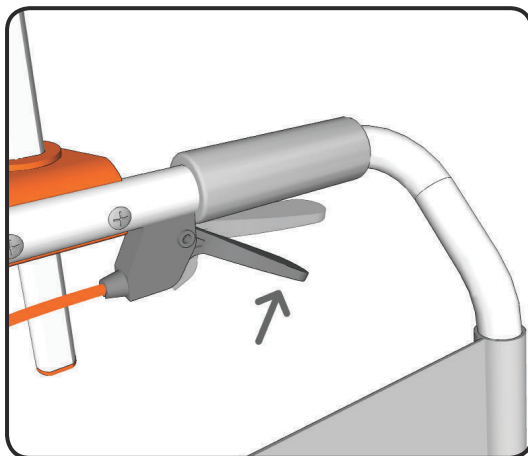

Trin 6

Tryk vippehåndtaget på ryggen for at vende stolen tilbage.

Når du klemmer på håndtaget, låses begge låsestiver op, og stolen kan placeres igen. Når håndtaget løsnes, vil låsestiverne sikre stolen på plads.

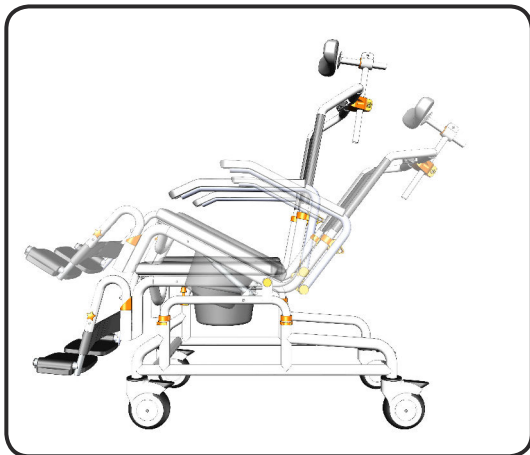

Trin 7


Mens klemme på bremsehåndtaget kan stolen returneres til lodret stilling. Når du har vendt stolen tilbage til højre position, skal du løsne vippehåndtaget, og låsestiverne sikrer stolen i position.

Når du vender stolen tilbage til højre stilling, skal du oprindeligt understøtte en lille mængde af brugerens vægt.


ADVARSEL

Anbring ikke hænder eller fingre rundt om den ydre kant af sædehynden, når du vipper eller vender tilbage fra vippepositionerne, da fingrene kan sidde fast mellem sæderammen og gummistoppet, hvilket kan medføre alvorlig personskaade. Hold armene og hænder på armlænene på alle tidspunkter.


stiverjustering

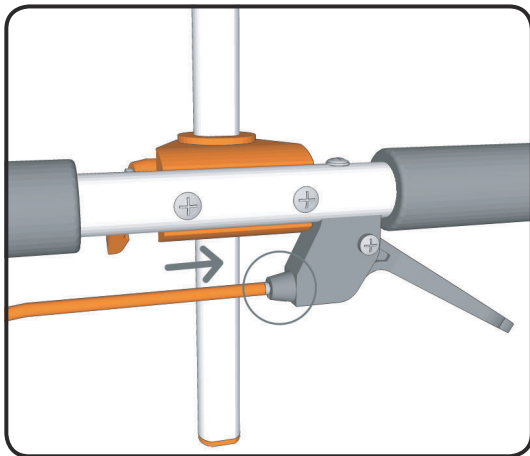

Kontroller, at den rustfrie stålhætte på enden af det orange kabel indsættes helt i vippehåndtaget som vist. Under emballering / forsendelse og ejeropsætning kan denne del undertiden komme ud.

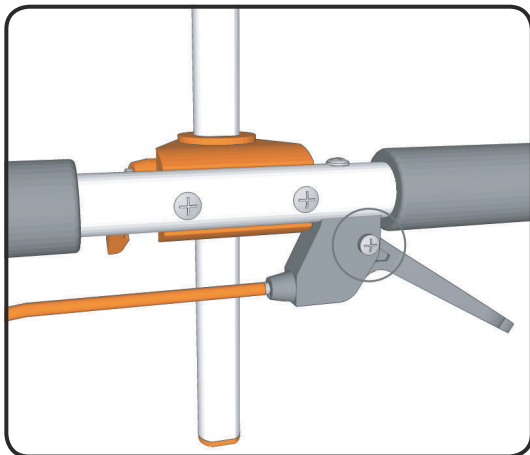


Kontroller for at sikre, at når håndtaget er klemmt ind, løsnes det, at håndtaget springer tilbage i den viste position. Hvis håndtaget ikke vender tilbage til frit sted, skal du bruge en skruetrækker til at løsne skruen på vippehåndtaget let. Dette gør det muligt for håndtaget at bevæge sig frit og vil også gøre det lettere at klemme på grebet.

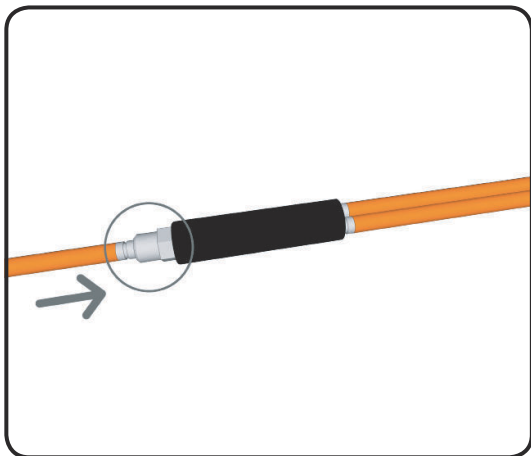


Kontroller, at kabeljusteringen er skruet helt ind, som vist.

Kontroller også, at den rustfrie stålhætte på enden af det orange kabel er sat helt ind i kabeljusteringen som vist. Under emballering / forsendelse og ejeropsætning kan denne del undertiden komme ud.

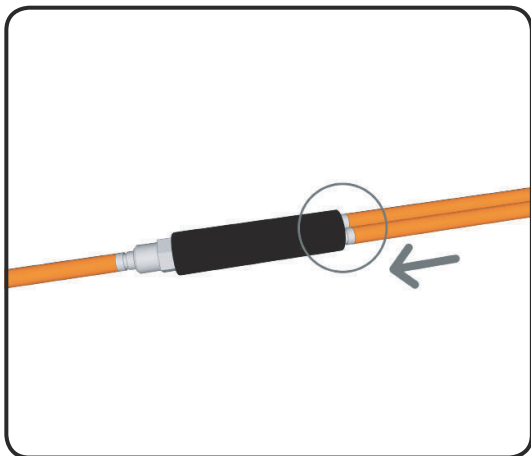

Kontroller, at de rustfrie stålhætter i enderne af begge de orange ledninger indsættes helt i kabeljusteringen som vist. Under emballering / forsendelse og opsætning af ejere kan disse dele undertiden komme ud.

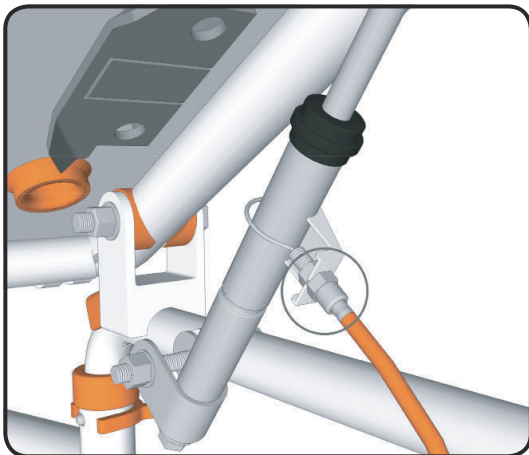

Kontroller, at kabeljusteringen er skruet helt ind, som vist.

Kontroller også, at den rustfrie stålhætte på enden af det orange kabel er sat helt ind i kabeljusteringen som vist. Under emballering / forsendelse og ejeropsætning kan denne del undertiden komme ud.

Kontroller, at der er en møtrik på ydersiden af stiverbeslaget og en møtrik på indersiden som vist.

Hvis du stadig oplever problemer med stolens tilbagelægning, skru kabeljustereren lidt ud for at løse dette.

BEMÆRK

- Vær forsigtig med ikke at skru kabeljusteren så langt, da dette forhindrer stivere, der låser i position, når stolen er tilbagelænet.

rengøring + vedligeholdelse

Det anbefales, at din brusestol serviceres årligt af din ZiboCare-forhandler eller en autoriseret, kompetent serviceagent, derudover:

1. Kontroller regelmæssigt alle dele af stolen for mangler. Enhver defekt del skal fjernes omgående.
2. Rengør sædet med en fugtig klud og en mild rengøringsmiddel. Læs altid producentens instruktioner, inden rengøringsmidlet påføres.

Når du bruger natriumhypochlorit (blegemiddel) på sædet, bør en opløsning af 0,1% natriumhypochlorit ikke have nogen negative virkninger på rengøringen af stole. Når man bruger en opløsning på 1,0%, skal man dog sørge for at skylle stole grundigt med rent vand efter påføring. Over en periode kan blegning forekomme, men produktets integritet forbliver upåvirket.

3. Tør brusestolen af efter brug.
4. Olie eller fedt på ingen dele.
5. Hold hjulene fri for kalkskala, sæberester og hår ved at rengøre efter brug i bruser.

Pleje af rustfrit stål.

Rustfrit stål har fremragende korrosionsbestandighed, men det er ikke plet- eller rustfast. Regelmæssig vedligeholdelse holder rustfrit stål rent og fri for forurenende stoffer. I de fleste anvendelser rustfrit stål ikke rust eller pletter, selv efter mange års service, men når det bruges i visse miljøer, såsom koncentreret klor eller andre ætsende elementer, kræver rustfrit stål korrekt pleje og vedligeholdelse. Lad ikke rustfri være i kontakt med jern, stål eller andre metaller.

1. Rengør ofte rustfrit stål med sæbe og vand. Enhver renere, der er sikker til glas, er normalt sikker for rustfrit stål; påføres med en bomuldsklud.
2. Brug en belægning såsom en god voks for at beskytte det rustfrie stål.
3. Fjern misfarvning eller rustpletter så hurtigt som muligt med en messing-, sølv- eller kromrener. Irreversibel grube vil udvikle sig under rust, der forbliver på rustfrit stål i et hvilket som helst tidsrum. Påfør en mild rengøringsmiddel som Ajax eller en lignende med en våd bomuldsklud i retning af kornet på finishen. Skyl grundigt og tør tør. Brug ikke slibemidler som sandpapir eller ståluld på rustfrit stål.
4. Rengør ikke med mineralsyrer eller blegemidler.
5. Opbevar ikke i nærheden af noget chlorprodukt.

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsadvarsel!

Manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan resultere i personskade eller skade!

Det er vigtigt, at brugeren / brugerne og / eller plejepersonerne for brugerne / lærerne, lærer, hvordan man betjener ZiboCare brusestol sikkert.

Følgende skal læses inden brug af brusebad med brusebad for at sikre sikker betjening af din brusebad med brusebad:

Ejerhåndbogen skal læses og forstås inden brug af brusebad med brusebad. Hvis du ikke forstår nogen dele i brugerhåndbogen, skal der søges afklaring inden brug af produktet.

For yderligere afklaring af alle dele af håndbogen til ZiboCare (r) skal du ringe til din lokale forhandler eller besøge webstedet herunder.

www.zibocare.dk

Overførsler til og fra brusebad med brusebad kan være farlige. Konsulter en fysisk eller ergoterapeut for at sikre, at man praktiserer sikre og pålidelige overførselsteknikker. Personer, der ikke har lært disse færdigheder, skal have hjælp under overførsler.

Brug ikke brusebad med brusebad til nogen anvendelse uden for producentens planlagte brug. Dette kan resultere i beskadigelse af bruser og komponenter. Hvis du ikke overholder producentens instruktioner, kan det resultere i personskade eller bruger. ZiboCare holdes ikke ansvarlig for personskade eller skader, der skyldes forkert brug eller upassende betjening af ZiboCare brusestol.

Hvis nogen del af brusebad med brusebad kræver vedligeholdelse, tøv ikke med at kontakte din forhandler. Eventuelle problemer, der kan have indflydelse på sikker betjening af stolen, SKAL følges med det samme.

Sikkerhedsinstruktioner:

Den maksimale BRUGER-vægt til denne ZiboCare brusestol er: 160 kg (160 kg)

Sørg altid for, at din ZiboCare brusestol er i stand til at manøvrere over de overflader, der vil blive stødt på, inden du bruger brusestolen med enhver bruger (e). Denne stol er kun beregnet til brug indendørs, på flade overflader uden tærskler, trin, kantsten eller forhindringer.

Lås ALLTID ZiboCare brusestol 5 "hjul, når stolen står stille. For at gøre dette trin på håndtagene, der aktiverer hjullåsen.

STÅ IKKE eller træd på fodstøtten, da stolen vil vippe fremad og muligvis forårsage personskade. Fodstøtterne er ikke bærende og er ikke beregnet eller designet som et trin ..

Læn dig IKKE fremad eller sidelæns ud af ZiboCare brusestol, da dette kan få stolen til at vælte. Kør IKKE ZiboCare brusestol ned ad en hældning uden en plejeperson, der kan kontrollere stolen under dens nedstigning.

Brug IKKE ZiboCare bremsestolhjulslåse som bremser, når du kører ned ad skråninger. Placer IKKE ZiboCare brusestol sidelæns på en skråning, da dette kan få den til at vælte.

Vigtig!

Selvom ZiboCare-teamet har gjort alt for at sikre stabiliteten af ZiboCare-brusestole under brug, er det vigtigt at erkende, at den mest farlige del af brugen af enhver brusestol er overførslen. Hvis du er usikker på, hvordan du udfører overførsler på en måde, der gentagne gange kan udføres sikkert, skal du kontakte en fysisk eller ergoterapeut, der er bekendt med overførselsteknikker og -muligheder.

Hjullåsene på hjulene er designet til at forhindre, at hjulene roterer, når brusestolen er papirvarer i brug. Disse kan IKKE forhindre, at hjulene glider, hvis gulvet er glat. Et glat gulv kan være forårsaget af støv, vand, sæbe eller ethvert stof, der ikke tillader dæk (dæk) at gribe fat. Overførsler bør aldrig forsøges med ZiboCare brusestol placeret på glatte overflader, da hjullåsene kun kan forhindre hjulene i at rotere. Det anbefales, at overførsler udføres på rene, tørre, glatte overflader.

Overførsel til en ZiboCare brusestol - lås altid alle hjul i deres udvendige position (forreste hjul placeret i frem- og udposition / baghjul anbragt i bag- og udposition) for maksimal stolstabilitet. Brug aldrig fodstøtterne til at hjælpe med overførsler. Dette kan få stolen til at vippe fremad. Fodstøtterne skal svinges væk eller fjernes helt under overførsler for at give uhindret adgang til brusestolen.

Befæstelsesorganerne - møtrikker, bolte, skiver - skal kontrolleres med jævne mellemrum for at sikre, at de er sikkert fastgjort. Alle møtrikker, der bruges på din ZiboCare brusestol er låsemøtrikker. Låsemøtrikker, der af en eller anden grund fjernes, skal udskiftes snarere end genanvendes. Din forhandler skal kaldes for at kontrollere fastgørelseselementerne og andre komponenter mindst en gang om året.

Alle ZiboCare brusestole leveres med bryst- og skødbånd, der sikrer korrekt og sikker betjening af brusestolen for både bruger (e) og plejepersonale. Det er vigtigt, at disse stropper bruges, hver gang brusestolen betjenes. Kontakt din lokale forhandler for en detaljeret liste over stropper, der fås som ekstraudstyr. Din brusebad med brusebad er udstyret med monteringspunkter, så disse let og nemt kan fastgøres.

Vigtig!

JUSTERINGER BØR ALDRIG BESKYTTES MED BRUGEREN (ER) I STOLEN!

Din autoriserede ZiboCare-forhandler kan hjælpe dig med eventuelle justeringer, du måtte ønske at foretage på din ZiboCare brusestol eller kan give afklaring om nogen af de oplysninger, der er indeholdt heri.

Alle hjulaksler skal indstilles til samme højde. Forsøg aldrig at ændre rammevinklen ved at ændre hjulpositionen. Hvis hjulene er ujævn, vil dette medføre, at stolens stabilitet kompromitteres og kan resultere i vipning.

	! WARNING Tungt objekt Brug løftehjælpemidler og korrekt løfteteknikker for at undgå muskelspænding eller rygskade under løft eller flytning af dette produkt.
---	---

garanti information

2 års begrænset garanti

ZiboCare garanterer vores ZiboCare Transfer Systems og alle ZiboCare-produkter til to år fra datoen for forbrugers købet. Garantien bliver først aktiv, når forbrugeren indsender garantiregistreringskortet til virksomheden med en kopi af købskvitteringen. Denne garanti dækker eventuelle defekter i materialer og udførelse af alle ZiboCare-produkter undtagen dem, der er anført i garantien Ekskludering nedenfor:
Undtagelser fra garanti

- Produkt eller dele svig ved normal slid
- Skader forårsaget af manglende overholdelse af brugermanualen
- Skader på grund af forkert installation, brug eller reparation
- Bremselinie, der betjener håndbremsen / vippe mekanismen på vippestole
- Forkert brug af håndspærren, der bruges til at justere nakkestøtten / justeringen
- Sædehynder og armlæn

Begrænsninger

- Garantien er GODT, hvis den originale serienummerkode fjernes eller ændres
- Garantien er GODT, hvis enheden får skade på grund af unaturlige årsager
- Garantien er GODT, hvis enheden bruges til at holde mere end vægtgrænsen på 160 kg (160 kg)
- Garantien er GODT, hvis enheden er blevet udsat for forsømmelse, forkert vedligeholdelse, opbevaring, rengøring eller betjening som defineret i brugervejledningen
- Garantien er GODT, hvis enheden ændres uden ZiboCare's skriftlige samtykke
- Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber fra købsdatoen, forudsat at der er indsendt et registreringskort til virksomheden inden for 60 dage efter købet.

Dit Ansvar

- Hvis din enhed kræver garantiservice, skal du kontakte forhandleren, som du har købt ZiboCare-enheden fra.
- Hvis du ikke modtager en tilfredsstillende forhandlerservice, skal du kontakte ZiboCare på nedenstående adresse.
- Ret ikke enheden tilbage til ZiboCare uden først at have fået et autorisationsnummer fra kundeservice
- En defekt enhed skal sendes til ZiboCare inden for 14 dage efter udstedelse af et returneringsgodkendelsesnummer af kundeservice

Vores ansvar

- ZiboCares eneste ansvar er at reparere eller udskifte, efter vores skøn, de dækkede komponenter på enheden. Dette er det eksklusive middel til følgeskader eller tilfældige skader.
- Efter forudgående godkendelse kan ZiboCare levere udvekslingstjenester til returnering af garanti. Under dette program kan en renoveret ZiboCare-enhed sendes efter returnering af den defekte enhed. Udvekslingsenheden kan indeholde brugte dele, der opfylder ZiboCare-kvalitetsstandarder. Dette program leveres efter ZiboCares skøn. Den originale garantiperiode vil ikke blive forlænget på grund af en sådan enhedsudveksling, og en returenhed bliver ZiboCares ejendom.

Genbrug

Denne medicinske enhed kan genbruges af en anden ejer, hvis den oprindelige ejer af produktet ikke har brug for det mere. Før genbrug skal enheden kontrolleres omhyggeligt af autoriseret teknisk personale.

Følgende elementer skal kontrolleres:

- strukturens stivhed
- tæthed i bolte og møtrikker
- plastelementers tilstand
- tilstand på hjul og kuglelejer
- effektivitet og tilstand af bremses.

Hvis nogle af ovenstående elementer er revet eller ødelagt, skal de udskiftes med nye dele. Det anbefales specielt at installere nye hjul, sæde og ryglæn til enhver ny bruger af enheden. Alle mister bolte og møtrikker skal strammes. Produktet skal renses nøjagtigt og desinficeres. Hver ny ejer skal modtage enheden med denne brugervejledning vedhæftet.

ADVARSEL!

Det er forbudt at genbruge enheden, hvis hovedrammen er bøjet eller ødelagt.

Bortskaffelse af din enhed

Enheden bør ikke deponeres med normalt affald. Din brusestol skal bortskaffes i henhold til gældende lokale og nationale lovbestemmelser. Kontakt dit lokale affaldsaffaldsagentur eller en autoriseret forhandler af rehabiliteringsudstyr for information om korrekt bortskaffelse af stolen, emballering, metalramskomponenter, plastkomponenter og andre materialer.



elimination through innovation

Designed in
New Zealand

