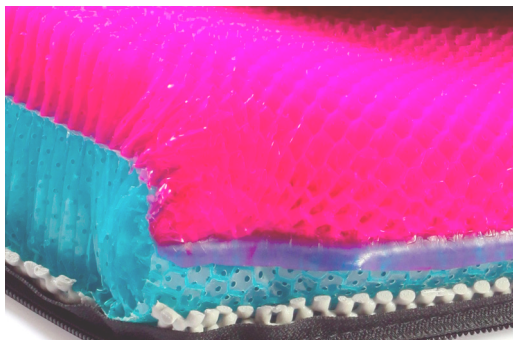




Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

26x26x6x5 cm

HMI nr.: 35763

Varenr.: PDCD1010

36x36x6x6 cm

HMI nr.: 35765

Varenr.: PDCD1414

31x31x6x5 cm

HMI nr.: 35764

Varenr.: PDCD1212



Stimulite® Contour Mini pude

Anatomisk konturformet siddepude til børn

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til børn og lette voksne under 45 kg.

Materiale

Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed. Puden er med til at give barnet tryghed i siddestillingen.

Anatomisk korrekt

Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt

Max 50 kg

Vægt

1,6 kg