


Cuddle

Beskyttende børneseng med transparente sengeheste

Cuddle fungerer som en sikker base for barnet, som trygt kan ligge bag de gennemsigtige sider og alligevel følge med i omverdenen. Sengens design og funktioner lever op til de nyeste EU-standarder og lovmæssige krav (DIN EN 50637).

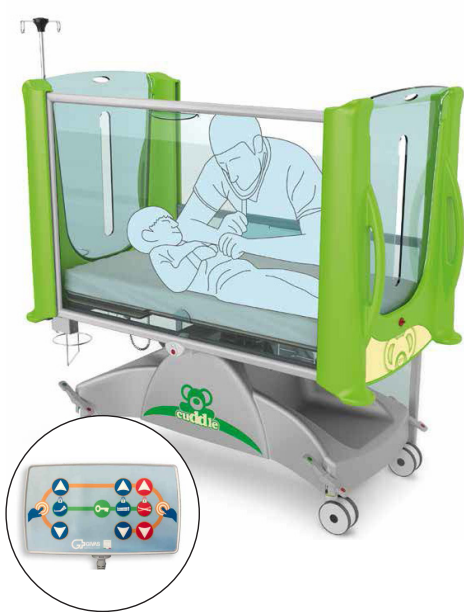

Beskyttet mod utilsigtet brug
Sengen betjenes nemt ved hjælp af den intuitive betjening, der kan låses væk, så barnet ikke unødigt ændrer sengens position.

Sikkert og hygiejnisk design

Sengens afrundede hjørner og kanter øger barnets sikkerhed, mens det øvrige design muliggør grundig rengøring, som øger hygiejnen.

De ovale åbninger i hoved- og fodgærdet er designet til sikker og let passage af slanger og ledninger.

Fleksible indstillinger

Hele liggefladen på Cuddle kan tiltes og hovedgærdet kan indstilles til en behagelig siddeposition for barnet. Det letter arbejdet for personalet og giver bedre lejring til fx børn med respiratoriske udfordringer.

Justerbar højde

Sengens højde kan justeres op for at tilgodese et bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet.

Praktiske plejefunktioner

Der er mulighed for at tilvælge en standard glideskinne til fastgørelse af udstyr, et robust dropstativ samt ophæng til drænpoter, som gør sengen ideel til enhver form for brug.

Plejeseng til børn

Funktionel og fleksibel

Med et højdejusteringsområde der går fra 70,7 til 110,7 cm, kan Cuddle bringes til en ergonomisk position til glæde for både patienten og plejepersonalet.

Sikker manøvrering

Med Cuddle kan manøvrering ske sikkert og nemt, da sengens mål er tilpasset børn. Cuddle er derfor både smallere og kortere end ved en almindelig hospitalsseng. Desuden kan den bremses hurtigt og sikkert ved hjælp af det centrale låsesystem på hjulene.

Trendelenburg position: 12°

Anti-Trendelenburg position: 12°

Ryglænets vinkel: 70°

Brugergruppe: Børn op til 125 cm

Ydre mål: 86,4 x 162,2 x 157,2 cm

Madras mål: 72,2 x 132,6 cm

Opdeling af madrasbase: 47,6 - 85 cm

Max. lasteevne: 100 kg

Produktvægt: 137 kg

Højdejustering: 35-91 cm

Højde på sengehest: 80 cm

Frihøjde på chassiset: 14,5 cm

Rengøring: IPX6-godkendt

Cuddle

Udstyr og tekniske data

Udstyr og valgmuligheder	
Udvendige sengemål	86,4 x 162,5 x 157,2 cm
Sengehest	
Transparent polycarbonat	X
Aluminiumstremmer	O
Hoved- og fodgærde	Aftagelige paneler af transparent polycarbonat
Farve på stel	Argentum svarende til RAL 9006
Dekontaminering, beskyttelsesgrad	IPX6
Madrasbasen	78 x 180 cm
2-sektions HPL-madrasbase	X
CPR-udløsning af hovedgærde	X
Hjul	
Ø125 mm dobbelthjul m. lukket hjulleje	X
Centrallås	X
Bremsepedal	4 x plastik, m. farvemarkering
Retningsposition på hjul	Hovedende, højre
Betjeningsenheder	Betjeningsboks, m. lys, i fodenden
Yderligere funktioner	
Standard glideskinne i hovedenden	O
Skuffe til betjeningsboks i fodenden, lårbær	X
Opbevaringsoverflader på chassiset	X

Ekstraudstyr	
Infusionsstander med 2 kroge	O
Infusionsstander med 4 kroge	O
Holder til fx drænposer	O
Elektroniske funktioner	
Belysning under sengen	O
Genopladeligt batteri	Lead-gel batteri

X = Standard
O = Tilkøb