


## Mono

# Tryckavlastande och vridbar skummadrass

Mono är en tryckavlastande skummadrass utvecklad med höga krav på kvalitet. Madrassen har god slitstyrka och rekommenderas för förebyggande av trycksår upp till högrisk eller sårgrad 3.

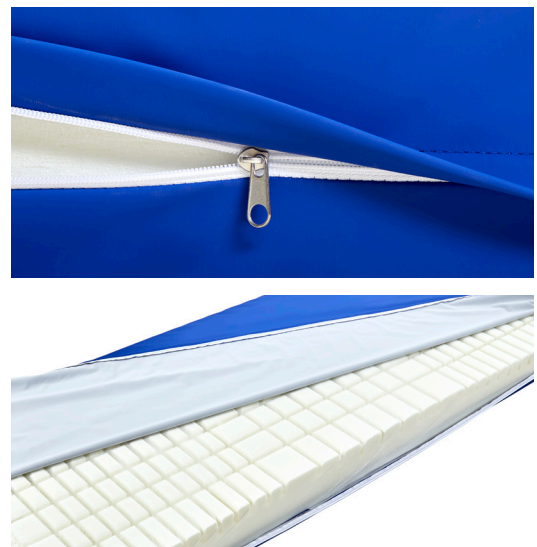

**Utmaning:** Trycksår är smärtsamma - men de kan förebyggas. Det kräver dock frekventa vändningar och förflyttningar som påverkar patientens välbefinnande. En Mono skummadrass kan bidra till att lindra detta.

### Material och utformning

Mono är tillverkad av höglastiskt kallskum och har ett inkontinensöverdrag. Skummet är skuret på ena sidan med olika skärdjup. Detta ger en indelning av 5 zoner som avlastar kroppens utsatta områden. Samtidigt har madrassen en bred skumkant som ger bättre stabilitet vid förflyttning i och ur sängen.

### Vridbar för längre livslängd

Mono är tillverkad som en vridbar skummadrass (på ena sidan), så dess livslängd kan förlängas ytterligare med hjälp av en vändrutin. Överdrag och madrass är tydligt märkta med botten och topp.

### Överdrag av hög kvalitet

Madrassen levereras med ett vattentätt och andningsbart inkontinensöverdrag. Överdraget har dragkedja på 3 sidor för enkel avtagning och tvätt. Dragkedjan är täckt med en stor överlappning som hindrar vätska från att tränga in i skumkärnan. Madrasskärnan är försedd med ett tygöverdrag (trico) som gör det enkelt att ta in och ut madrassen ur överdraget vid tvätt. Trico ser också till att skumkärnan och överdraget glider lätt mot varandra, så att friktion och skjuvning inte överförs till användaren.

### Enkel hantering

Madrassen är enkel att hantera eftersom den är utrustad med robusta handtag. Man kan alltid lyfta madrassen ur sängen, oavsett vilken sida man står på.

Kontakta våra produktspecialister inom förebyggande av trycksår om du vill veta mer om produkten.

## Mono

# Tryckavlastande och vridbar skummadrass

Mono är en tryckavlastande skummadrass utvecklad med höga krav på kvalitet. Madrassen har god slitstyrka och rekommenderas för förebyggande av trycksår upp till högrisk eller sårgrad 3.



### Utformning

Mono är tillverkad av höglastiskt kallskum, som är skuret på ena sidan med olika skärdjup. Det delar upp madrassen i 5 zoner, som motsvarar kroppens tryckpunkter.

### Vridbar

Mono är tillverkad som en vridbar skummadrass (på ena sidan), så dess livslängd kan förlängas ytterligare med hjälp av en vändrutin.

### Enkel nedläggning och uppstigning

En fast skumkant gör det lättare att mobilisera och ta sig ur sängen.

## Tekniska data

Mono finns i flera versioner:

### 80x200x14 cm

Artikelnummer: 10-007367

### 83x200x14 cm

Artikelnummer: 10-007745

### 85x200x14 cm

Artikelnummer: 10-007744

### 88x200x14 cm

Artikelnummer:  
88200MONO

### 90x200x14 cm

Artikelnummer: 10-  
009700

### 100X200X14 cm

Artikelnummer: 10-  
010363

### 105x200x14 cm

Artikelnummer: 10-  
010429

### 110x200x14 cm

Artikelnummer: 10-  
010364

**Användarvikt:** 0-150kg

**Madrassens vikt:** Ca. 10 kg (beroende på storlek)

**Material:** Brandhämmande HR PUR-skum med hög elasticitet

**Överdrag:** PU inkontinensöverdrag

**Rengöring:** Torka av madrassen med tvålatten och desinfektionsmedel. Överdraget kan tvättas i max 95 grader.

Kontakta våra produktspecialister inom förebyggande av trycksår om du vill veta mer om produkten.