

## Mono Plus

# Tryckavlastande skummadrass med Anti-skjuv

Mono Plus är en tryckavlastande skummadrass med höga krav på kvalitet, hållbarhet och tryckreducerande effekt. Mono Plus rekommenderas i första hand för att förebygga trycksår upp till högrisk eller sårkategori 4.



### Material och utformning

Mono Plus är utformad med höglastiskt kallskum och inkontinensöverdrag. Mono Plus har ett skuret skum på en sida med olika skärdjup.

Madrassen är indelad i 5 zoner för att motsvara kroppens tryckpunkter. Den är också utrustad med en bred skumkant som ger bättre stabilitet vid förflyttning i och ur sängen.

### Anti-skjuv

Det specialdesignade multistretchöverdraget har 3 skjavsänkande zoner under hämlarna, korsbenet och skulderbladen.. Den skyddar mot skador som kan uppstå vid förskjutning och rotation/flyttning.

### Överdrag av hög kvalitet

Madrassen levereras med ett vattentätt, men andningsbart inkontinensöverdrag. Överdraget har dragkedja på 3 sidor för enkel avtagning och

tvätt. Dragkedjan är täckt med en stor överlappning som förhindrar att vätska tränger in genom dragkedjan till skumkärnan. Madrassens kärna är utrustad med ett tygöverdrag (trico) som gör det enkelt att ta in och ut madrassen ur överdraget vid tvätt. Trico säkerställer också att skumkärnan och överdraget glider lätt mot varandra utan motstånd, vilket innebär att ingen friktion och skjuvning överförs till användaren.

### Enkel hantering

Madrassen är enkel att hantera eftersom den är utrustad med handtag så att man alltid kan lyfta madrassen ur sängen. Handtagen är även förstärkta på insidan av överdraget för en extra lång livslängd.

### Rengöring


Överdraget kan tvättas i max 95 grader.

Kontakta våra produktspecialister inom förebyggande av trycksår om du vill veta mer om produkten

## Mono Plus

# Tryckavlastande skummadrass med Anti-skjuv

Mono Plus är en tryckavlastande skummadrass med höga krav på kvalitet, hållbarhet och tryckreducerande effekt. Mono Plus rekommenderas i första hand för att förebygga trycksår upp till högrisk eller sårkategori 4.

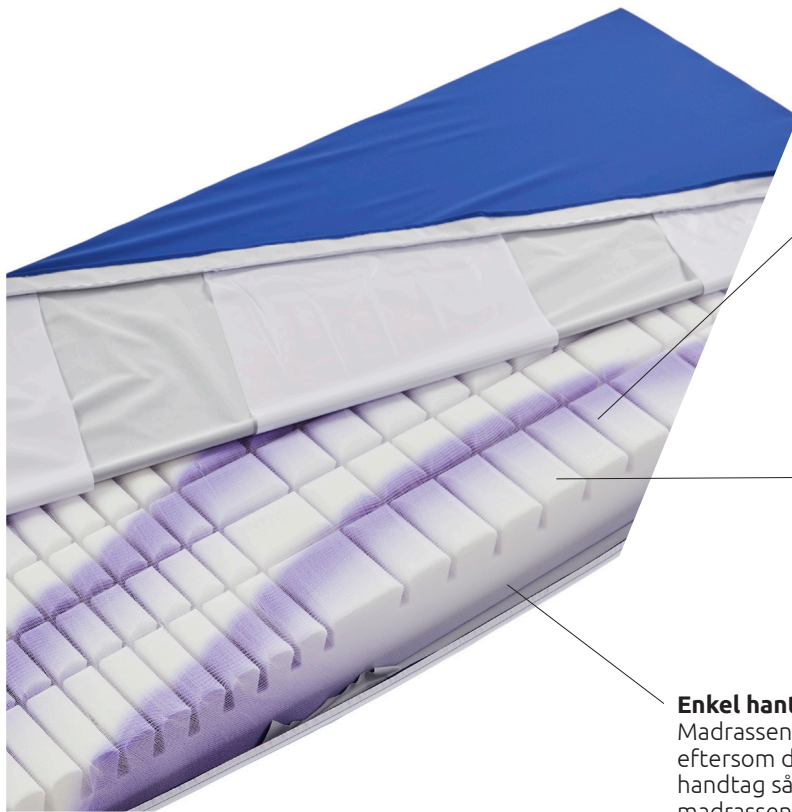

### Utformning

Mono Plus är utformad med höglastiskt kallskum och inkontinensöverdrag. Mono Plus har ett skuret skum på en sida med olika skärdjup.

### Material

Madrassen är tillverkad av brandhämmande HR PUR-skum med hög elasticitet. Överdraget är andningsbart och elastiskt PU

### Enkel hantering

Madrassen är enkel att hantera eftersom den är utrustad med handtag så att man alltid kan lyfta madrassen ur sängen.

## Tekniska data

Mono Plus finns i flera versioner:

**83x200x14 cm**  
REF: MonoP83

**85x200x14 cm**  
REF: MonoP85

**88x200x14 cm**  
REF: MonoP88

Patientens position måste ändras regelbundet med hjälp av ett vändschema, madrassen kan inte ensam stå för behandlingen.

**Användarens vikt:** 0-150 kg

**Madrassens vikt:** Ca. 10 kg, beroende på storlek

**Material:** Brandhämmande HR PUR-skum med hög elasticitet. 42 kg/m<sup>3</sup>.

**Överdrag:** Andningsbart och elastiskt PU

Kontakta våra produktspecialister inom förebyggande av trycksår om du vill veta mer om produkten