


Nyx Dry

Trykaflastende skummadras

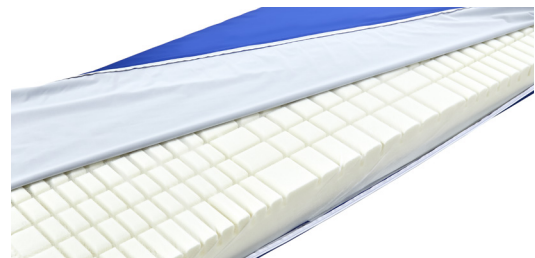

Materiale

Nyx Dry er fremstillet af elastisk og formstabilt polyuretanskum, som sikrer høj komfort og en jævn fordeling af trykket over hele kroppen.

Opbygning

Skumkernens liggeflade har profilerede udskæringer, der bidrager til trykaflastning ved at øge kontaktfladen mellem krop og madras. Udskæringerne varierer i dybde og størrelse og inddeler madrassen i fem ergonomiske zoner, som giver målrettet støtte til kroppens naturlige tyngdepunkter.

Mod kanten er profileringen mindre dyb og felterne bredere, hvilket giver ekstra stabilitet ved forflytning og ved ind- og udstigning af sengen. Den profilerede overflade øger desuden luftcirkulationen, reducerer forskydningsbelastning (shear) og forbedrer tilpasningen til kroppens konturer.

Madrassen er udstyret med udskæringer på bagsiden, der gør det muligt for madrassen at tilpasse sig sengens konturer ved hovedgærde- og knæledselevation, hvilket sikrer en stabil og komfortabel position under ændringer i sengens stilling.

Skumkernen er beklædt med trikotstof, hvilket gør betrækket let at af- og påmontere i forbindelse med vask, samtidig med at det forhindrer folder. Trikotstoffet sikrer, at skumkernen og betræk glider jævnt mod hinanden, hvilket minimerer friktion og forskydningsoverførsel til brugeren.

Dry PU-betræk

Betrækket er semipermeabelt, hvilket gør det både åndbart og væsketæt. Det tillader fugt at passere, hvilket sikrer en tør overflade og hjælper med at forhindre hudmaceration. Betrækket er udstyret med en semi-dry lynlås som forhindrer, at væsker trænger ind til skumkernen, mens den stadig tillader luftcirkulation.

Det strækbare materiale i alle retninger reducerer risikoen for forskydning og beskytter huden mod trykskader.

Nem håndtering

For nem håndtering er betrækket udstyret med lynlås på tre sider og fire håndtag (to på hver langside).

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om produktet.

Nyx Dry

Trykaflastende skummadras



Opbygning

Nyx Dry er fremstillet af elastisk og formstabil polyuretanskum. Madraskernen er opskåret på begge sider, hvilket øger kontaktfladen mellem krop og madras, samt sikrer madrassens evne til at tilpasse sig sengens konturer.

Nem ind- og udstigning

Bredere udskæringer ved kanterne giver ekstra stabilitet ved forflytning og ind- og udstigning af sengen

Nem håndtering

For nem håndtering er betrækket udstyret med lynlås på tre sider og fire håndtag



Dry PU-betræk

Betrækket er semipermeabelt, hvilket gør det både åndbart og væsketæt. Det er udstyret med en dry lynlås som forhindrer, at væsker trænger ind til skumkernen, mens den stadig tillader luftcirkulation

Tekniske data

Varianter:

800x2000x140 mm

HMI nr.: 139651

Varenr.: 8152090

850x2000x140 mm

HMI nr.: 139556

Varenr.: 8149199

Vægt: Gennemsnit 10,4 kg (alt efter størrelse)

Brugervægt: 30 - 150 kg

Materiale: Polyuretanskum, 45 kg/m³

Betræk: Semipermeabelt PU-betræk

Rengøring: Den komplette madras kan vaskes i et automatiseret vaskesystem, eller betrækket kan tages af og vaskes i en almindelig vaskemaskine.



Tekniske Specifikationer

Madrassen er testet i henhold til EN 597-1 og EN 597-2 og lever op til kravene for modstand mod antændelse.

Betrækket er testet i henhold til ISO 12952-1 og ISO 12952-2 og lever op til kravene for modstand mod antændelse.

Madrassen er testet for biologisk sikkerhed i henhold til ISO 10993-5, ISO 10993-10 og ISO 10993-23 og er vurderet som ikke-cytotoksisk, ikke-irriterende og ikke-sensibiliserende.

Miljø

Skumkernen og betrækket er certificeret i henhold til Oeko-Tex Standard 100 klasse II

