

Pro-care Auto Plus Bariatric

Trykaflastende vekseltryksmadras med selvindstillende pumpe

Pro-care Auto Plus Bariatric er en dynamisk trykaflastende helmadras med en lydsvag pumpe, som automatisk tilpaser sig patientens vægt og lejring. Madrassen består af støjsvage luftceller, som giver den bariatriske patient ekstra støtte og komfort.



Udfordring: Tryksår er smertefulde - men de kan forebygges. Det kræver dog hyppige vendinger og forflytninger, som påvirker patientens velvære. Det er både tidskrævende og hårdt fysisk arbejde for plejepersonalet.

Opbygning

Pro-care Auto Plus Bariatric er opbygget som en trykaflastende helmadras i cell-on-cell-design med individuelle, udskiftelige luftceller, der tilsammen giver en stabil og komfortabel liggeflade.

Automatisk trykregulering og brugervenlig indstilling

Madrassen justerer automatisk trykket efter patientens vægt og lejring, så brugeren får et passende støtte- og komfortniveau.

Pumpen arbejder i vekslende cyklusser, hvor trykket løbende øges og lettes for at give trykaflastning, og den kan desuden anvendes i en mere rolig, statisk indstilling ved behov for ekstra stabilitet.

Hælfunktion

Den enkelte luftcelle kan nemt fjernes for at opnå nultryk og forebygge trykskader på hælen.

Terapi- og cyklustidsindstillinger

Systemet tilbyder flere cyklustider på 10, 15, 20 og 25 minutter, så behandling og komfort kan tilpasses den enkelte situation.

Med tre terapiformer (vekseltryk, lavt vekseltryk og konstant lavt tryk) giver madrassen fleksible indstillinger til forskellige behov og præferencer hos brugere.

Autofirm-funktion


Funktionen gør madrassen mere fast og stabil ved fx pleje og forflytninger og er tidsbegrænset til ca. 20 minutter, hvorefter pumpen automatisk vender tilbage til den tidligere indstilling.

Betræk til optimal hygiejne

Betrækket er strækbart i alle 4 retninger, vandtæt og åndbart, og fastgøres med lynlås på alle fire sider af madrassen.

Kontakt vores specialister i tryksårsforebyggelse for at høre nærmere om mulighederne, brugen og effekten af Pro-care Auto Plus Bariatric.

Pro-care Auto Plus Bariatric

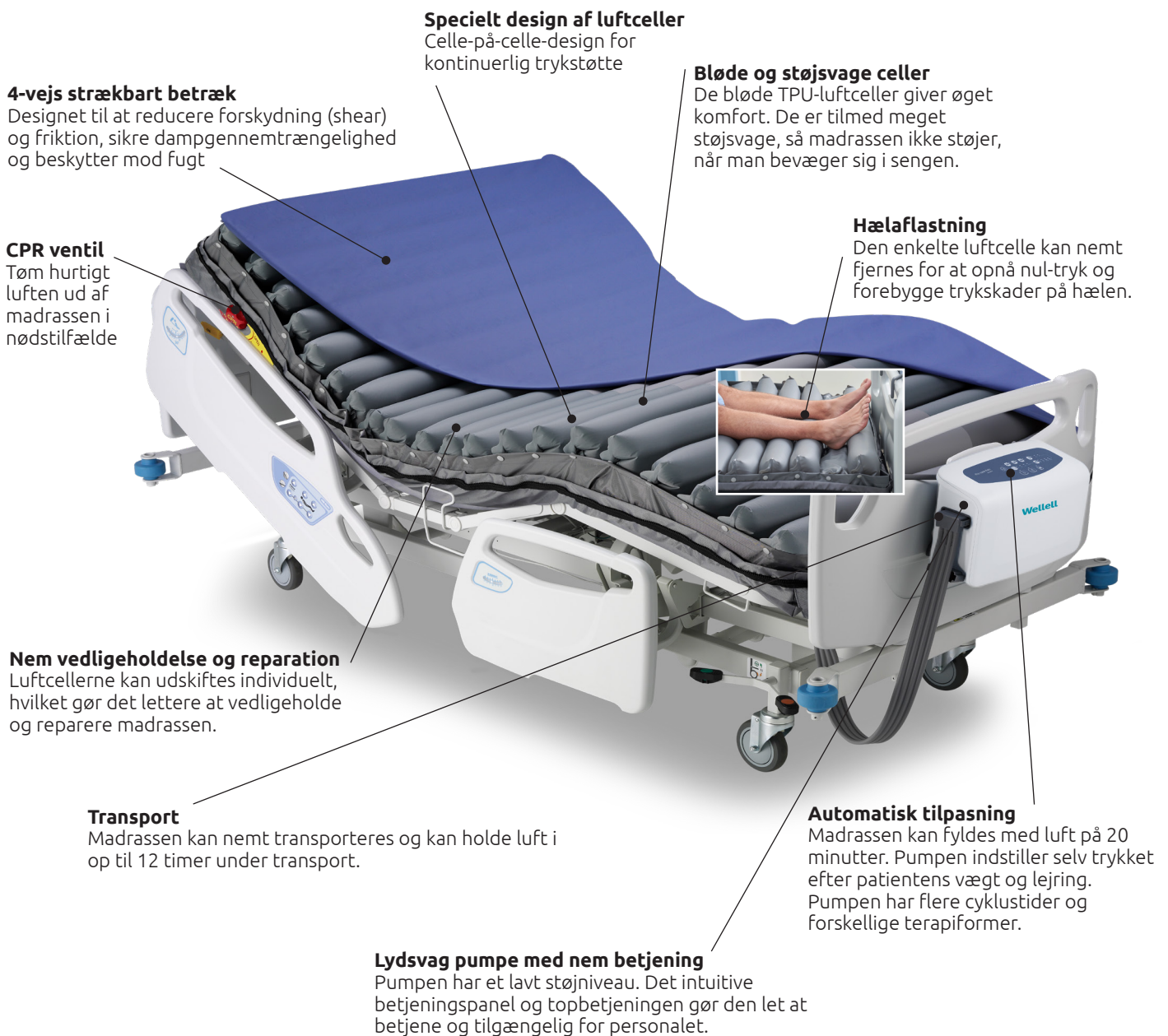

Dynamisk vekseltryksmadrass

Kliniske egenskaber

Optimal trykfordeling og trykaflastning med flere behandlingsvalg: vekseltryk, lavt vekseltryk og konstant lavt tryk. Reducerer varme og fugt. Indbygget hælfunktion. Tværgående luftceller yder maksimal stabilitet og komfort.

Pro-care Auto Plus Bariatric

er ideel til bl.a. behandling af grad 1-4 trykskader, forebyggelse til højrisikobruger, bariatriske borgere og patienter der ikke kan repositionere sig selv, er smerteplagede eller sensitive.

Størrelser:

107x200x20 cm

Varenr.: 70756

HMI: 134719

122x200x20 cm

Varenr.: 70755

HMI: 134720

107x210x20 cm

122x210x20 cm

107x220x20 cm

122x220x20 cm

Max. brugervægt: 450 kg

Madrassvægt: 13 kg

Sammensætning: Støjsvage TPU-celler

Betræk: PU inkontinensbetræk

Pumpevægt: 3,8 kg

Pumpemål: 20,5x34x13,5 cm

Indstillinger: Cyklus m. intervaller på 10, 15, 20 og 25 minutter

Rengøring: Madrassen tørres af i sæbevand og desinfektionsmidler. Pumpen desinficeres med gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en klud. Betrækket kan vaskes ved max 95 grader.