

Zibo Zlide

Praktisk glidedug med forskellige grader af elasticitet

Zibo Zlide er udviklet til påsætning af sejl, forflytninger samt af- og påklædning af borgere og patienter. Glidedugen er ekstra holdbar pga. materialets dobbeltvævning, og den har derved mindre tendens til at flosse i kanterne ved hyppig brug. Zibo Zlide findes i ruller og som enkeltstykker.



Udfordring: Forflytninger af borgere eller patienter med hel eller delvis funktionsnedsættelse kan være fysisk krævende for plejepersonalet. Desuden kan en forflytning være ubehageligt for den person, der skal forflyttes.

Anvendelsesområder

Glidedugen bruges til påsætning af sejl, forflytninger samt af- og påklædning af borgere og patienter. Zibo Zlide mindsker friktion og gør det lettere for plejepersonalet at forflytte borgeren eller patienten - uanset vedkommendes mobilitetsniveau - og uden at forflytningen bliver en belastning for personalet.

Flere udgaver og elasticiteter

Zibo Zlide fås i to udgaver - rød og grøn - der har forskellige grader af elasticitet. Hver enkelt glidedug har derfor også sit eget funktionsområde. Glidedugene kan placeres direkte under personen eller et trækstykke.

Rød Zibo Zlide: Det bedste valg ved af- og påklædning. Glidedugen er meget elastisk, lydløs og føles blød mod huden. Særligt velegnet til forflytninger og pleje af personer med demens, hjerneskadede eller terminale patienter.

Grøn Zibo Zlide: En glidedug med et bredt funktionsområde. Særligt velegnet til generelle forflytninger i seng eller kørestol samt på- eller aftagning af løftesejl. Mindre elastisk end den røde Zibo Zlide.

Kontakt vores produktspecialister for at høre nærmere om produktet.

Zibo Zlide

Praktisk glidedug med forskellige grader af elasticitet



Glat og vandtæt overflade

Glidedugene har en silicone-belægning på begge sider, så de kan ikke vendes forkert. Belægningen gør overfladen vandtæt, og mindsker friktionen i alle retninger.

Forskellige elasticiteter

Zibo Zlide har forskellige grader af elasticiteter og kan derfor anvendes til forskellige opgaver inden for forflytninger samt af- og påklædning.


Nem og hurtig rengøring

Glidedugene har ingen syninger eller huller og rengøres derfor hurtigt og nemt ved at tørre glidedugen over med desinficerende midler.



Praktiske enkeltstykker

Glidedugene findes også som enkeltstykker og kommer i små praktiske æsker. Nogle størrelser har også en pose inkluderet.

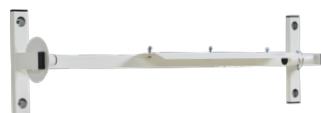

Holder til rulle

Holderen kan fås i to udgaver, så den kan indeholde en eller to ruller. Kan monteres vertikalt eller horisontalt.

Zibo Zlide

Ruller:

Rød: 1,5x100 m

Varenr.: ZZ15100RED
HMI nr.: 128489

Rød: 1x100 m

Varenr.: ZZ1100RED
HMI nr.: 129707

Rød: 1x10 m

Varenr.: ZZ110REDw
HMI nr.: 132002

Grøn: 1,5x100 m

Varenr.: ZZ15100GREEN
HMI nr.: 128486

Grøn: 1x100 m

Varenr.: ZZ1100GREEN
HMI nr.: 129704

Grøn: 1x10 m

Varenr.: ZZ110GREEN
HMI nr.: 132005

Stykker:

Rød: 1x1,5 m, 20 stk.

Varenr.: ZZ115RED
HMI nr.: 128476

Grøn: 1x1,5 m, 20 stk.

Varenr.: ZZ115GREEN
HMI nr.: 128480

Grøn: 1x1,5 m, 10 stk. m. pose

Varenr.: ZZ115GREENPOSE
HMI nr.: 128480

Rød: 1x1,5 m, 10 stk. m. pose

Varenr.: 7010177
HMI nr.: N/A

Grøn: 1,2x1,5 m, 10 stk. m. pose

Varenr.: 7010175
HMI nr.: N/A

Rød: 1,2x0,75 m, 10 stk. m. pose

Varenr.: 7010176
HMI nr.: N/A

Vægdispenser:

1 rulle - 100 cm.

Varenr.: ZZ100X1

1 rulle - 150 cm.

Varenr.: ZZ150X1

2 ruller - 150 cm.

Varenr.: ZZ150X2

Udgaver	Rød	Grøn
Elasticitet	Blød	Standard
Velegnet til	Påklædning	Allround

Indholdsstoffer: 100% nylon med silikonebelægning - OEKO-TEX Standard 100 - Klasse 1 certificeret.



STANDARD
100

19.HCN.78641
HOHENSTEIN HTTI

Anvendelse: Kan placeres direkte under personen eller et trækstykke.

Rengøring: Tåler aftørring med sæbe og/eller desinfektionsmiddel. Kan skylles op i hånden eller maskinvaskes på skåneprogram uden skyllemiddel.

Glidedugen kasseres når den er slidt eller personen ikke længere skal benytte den.