

Praktisk glidedug til forflytning og på-/afklædning

Forflytning og på-/afklædning af borgere og patienter med nedsat funktion er komplekse opgaver, hvor der er behov for hjælpemidler, som understøtter en sundhedsfremmende indsats hos borgeren med fokus på egne ressourcer og samtidig sikrer et godt arbejdsmiljø for personalet.



Zibo Zlide er en glidedug i 100 % nylon, udviklet til manuelle forflytninger samt af- og påklædning af borgere og patienter. Den tætte vævning giver ekstra holdbarhed ved hyppig brug. Zibo Zlide findes både på rulle og som færdigskåret enkeltstykker.

Anvendelsesområder

Zibo Zlide anvendes til:

- Forflytninger (fx. op i seng, vending, sideleje og længere tilbage i stol)
- Af- og påklædning, fx kompressionsstrømper og andet tætsiddende tøj

Ved at reducere friktionen gør glidedugen det muligt at gennemføre forflytninger og påklædning med rolige, kontrollerede bevægelser, som både støtter borgerens egne ressourcer og mindsker den fysiske belastning for personalet.

Zibo Zlide Green - Allround:

- Standardelasticitet og bredt funktionsområde.
- Velegnet til generelle forflytninger i seng og kørestol samt på- og afgang af løftesejl.

Zibo Zlide Red - Soft:

- Tynd glidedug som giver en blød og behagelig overflade mod huden.
- Velegnet til af- og påklædning, fx kompressionsstrømper og andet tætsiddende tøj, og kan desuden anvendes til forflytninger.

Kontakt vores produktspecialister for at høre nærmere om produktet.

Praktisk glidedug til forflytning og på-/afklædning



Glat og vandtæt overflade

100 % nylon med en overfladebehandling, der mindsker friktionen i alle retninger (særligt når Zibo Zlide bruges dobbeltfoldet) og gør det lettere at udføre rolige, kontrollerede forflytninger.

Single Patient Multiple Use:


Zibo Zlide er et single patient multiple use produkt: den følger én borger og kasseres, når den er slidt, eller når borgeren ikke længere skal bruge den.

Nem og hurtig rengøring

Glidedugene har ingen syninger eller huller og rengøres derfor hurtigt og nemt ved at tørre glidedugen af med desinficerende midler.

Praktiske enkeltstykker

Zibo Zlide fås også som færdigskårne enkeltstykker, der leveres i æsker. For enkelte størrelser medfølger der en opbevaringspose.

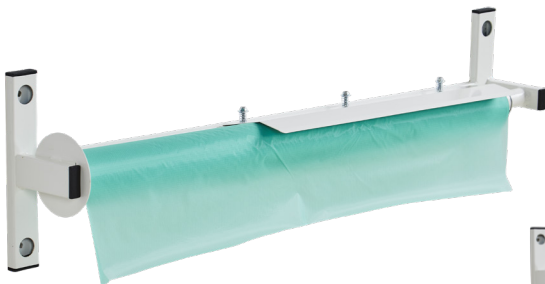

Holder til rulle

Til rullerne kan man tilkøbe en holder. Holderen kan fås i to udgaver, så den kan indeholde en eller to ruller. Kan monteres vertikalt eller horisontalt.

Zibo Zlide

Ruller:

Red Soft: 1,5x100 m

Varenr.: ZZ15100RED
HMI nr.: 128489

Red Soft: 1x100 m

Varenr.: ZZ1100RED
HMI nr.: 129707

Red Soft: 1x10 m

Varenr.: ZZ110RED
HMI nr.: 132002

Green Allround: 1,5x100 m

Varenr.: ZZ15100GREEN
HMI nr.: 128486

Green Allround: 1x100 m

Varenr.: ZZ1100GREEN
HMI nr.: 129704

Green Allround: 1x10 m

Varenr.: ZZ110GREEN
HMI nr.: 132005

Stykker:

Red Soft: 1x1,5 m, 20 pcs/box

Varenr.: ZZ115RED
HMI nr.: 128476

Green Allround: 1x1,5 m, 20 pcs/box

Varenr.: ZZ115GREEN
HMI nr.: 128480

Green Allround: 1x1,5 m, with bags 10 pcs/box

Varenr.: ZZ115GREENPOSE
HMI nr.: 128480

Vægholder:

1 rulle - 100 cm

Varenr.: ZZ100X1

1 rulle - 150 cm

Varenr.: ZZ150X1

2 ruller - 150 cm

Varenr.: ZZ150X2

Udgaver	Soft	Allround
Elasticitet	Blød	Standard
Velegnet til	Af- og påklædning	Forflytning

Materialer:

Basismateriale: 100% nylon

Belægning: Styren akryl baseret

OEKO-TEX Standard 100 - Klasse 1 certificeret.



Anvendelse:

Ved forflytning: Zibo Zlide Green Allround bruges dobbeltfoldet direkte under personen.

Ved på- og afklædning: Zibo Zlide Red Soft føres dobbeltfoldet ind mellem tøjet og huden.

Rengøring: Tåler aftørring med sæbe og/eller desinfektionsmiddel. Kan skylles af i hånden eller maskinvaskes på skåneprogram uden skyllemiddel.

Zibo Zlide kasseres når den er slidt eller personen ikke længere skal benytte den.

